

# Instructions de montage M8109-FR

## Pièce de rechange Module Niveau (N/ID T25561)

### Objectif

Remplacement de Module Niveau (A 10)

### Conditions



#### **MISE EN GARDE !**

##### **Danger pour les personnes non autorisées**

Les travaux de transformation ne doivent être effectués que par un personnel qualifié formé à cet effet.

Par conséquent :

- Tenir les personnes non autorisées à l'écart de la zone de travail.



#### **REMARQUE !**

*Le manuel d'instruction doit avoir été lu et compris avant d'effectuer toute transformation de l'appareil.*

### Processus



#### **DANGER !**

##### **Danger de mort par électrocution !**

Le contact avec les pièces sous tension présente un danger de mort direct.

C'est pourquoi:

- Pour tous les travaux sur l'installation électrique et dans le cas d'opérations de maintenance, de nettoyage et de réparation, retirer la fiche ou couper toutes les bornes de l'alimentation externe et empêcher tout redémarrage. Contrôler l'absence de tension.



#### **AVERTISSEMENT!**

##### **Risque d'écrasement en cas de roulage ou de basculement**


Sur un sol non plan ou si les roues ne sont pas verrouillées, l'appareil risque de basculer ou de se déplacer de façon incontrôlée et de provoquer des blessures par écrasement.

C'est pourquoi:

- S'assurer que le thermostat est bien fixé sur une surface plane et solide avant d'effectuer tous travaux de transformation.
- S'assurer que les roues sont verrouillées.

## Instructions de montage M8109-FR

1. Laisser refroidir l'appareil et le mettre hors circuit, en procédant comme suit :
  - Appeler la page de menu **Fonctions**.
  - Sélectionner la fonction **Refroidissement** et l'activer avec la touche **OK**.

→ La fonction activée est affichée par le symbole .
2. Mettre l'interrupteur principal hors circuit et débrancher la fiche d'alimentation.
3. Desserrer et retirer les vis sur l'avant et rabattre l'avant vers le bas.
4. Remplacer la carte de mesure du niveau de remplissage (A 10) en procédant comme suit :
  - Retirer la carte de mesure du niveau de remplissage.
  - Retirer le support de carte de la GIF-51 (A 4).
  - Monter un support de carte neuf sur la GIF-51.
  - Enfiler la nouvelle carte de mesure du niveau de remplissage à l'emplacement X2, sur la GIF-51.

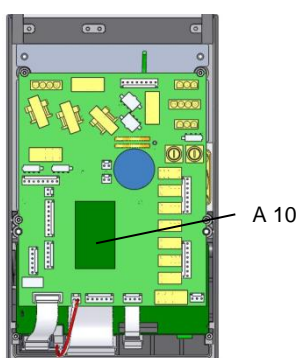




Fig. 1 : Avant rabattu vers le bas

5. Relever l'avant et le fixer.
6. Brancher la fiche d'alimentation et mettre l'interrupteur principal en circuit.
7. Mettre l'appareil en circuit au moyen de la touche .
8. Contrôler les fonctions de l'appareil.
9. Mettre l'appareil hors circuit au moyen de la touche .
10. Mettre l'interrupteur principal hors circuit.

## Liste des pièces

N°	Description	N/ID	Pcs
01	Module Niveau	T25187	1
02	Cadre support 6,4 mm	T24650	2
03	Instructions de montage allemand	M8109-DE	1
04	Instructions de montage anglais	M8109-EN	1
05	Instructions de montage français	M8109-FR	1